

折りたたみ式簡易便器 (8700AC)

取扱説明書

1. 安全上の注意

- 1) 本品の改造をしないでください。
- 2) 本品の各部に破損又は変形等の異常がみられたときは使用しないでください。
- 3) 必ず座面受けフレームを補強アームの上に固定してから、ゆっくりと座面をおろしてください。固定金具に過度の力がかかり、破損の原因となります。
- 4) 踏み台のように本品の上に立ち上がるなどの行為は大変危険ですので絶対に行わないでください。
- 5) 脚部の破損や変形、転倒のおそれがありますので、座ったままで本品をひきずったり、背もたれに体重をかけすぎないようにしてください。
- 6) ご使用の際は必ず平らな面に設置してください。また、シートに浅く腰掛けると転倒するおそれがありますので、シートの中央に正しく腰掛けてください。
- 7) 勢いよく座ると破損や変形、転倒のおそれがありますので、ゆっくりと腰掛けてください。
- 8) 座面やパイプの隙間等に指等を入れると抜けなくなるおそれがありますのでご注意ください。

2. 製品概要

- 1) 材質
本体 : スチール
座面/便ふた : 高密度ポリエチレン
- 2) サイズ
本体サイズ : 幅 520×奥行 515×高さ 640～740mm
座面サイズ : 幅 380×奥行 400mm
座面高 : 430～530mm (25mm ピッチで 5 段階調節)
肘掛け高 : 200mm
- 3) 耐荷重 : 150kg
- 4) 付属品 : バケツ (蓋付)




3. 組立方法

- 1) 手すりを左右へ開きます。





注意


座面の脱落防止テープは、組立が完了するまで取り外さないでください。脱落により固定金具が破損するおそれがあります。

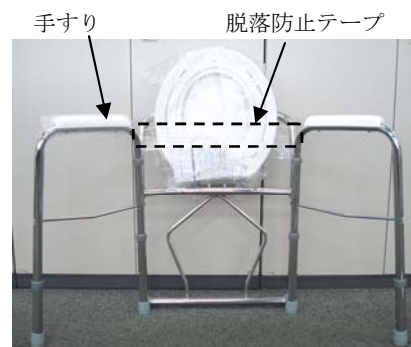

- 2) 2 本の後脚のプッシュボタンを押し込んで後脚を縮めておき、その後方にある座面受けフレームを手前に移動させます。

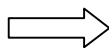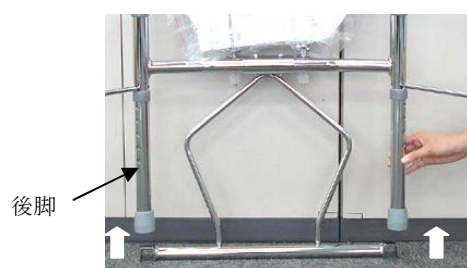

- 3) 縮めた後脚を元の長さに戻して 4 本の脚が同じ高さになるように固定し、座面受けフレームを補強アームの上に固定します。

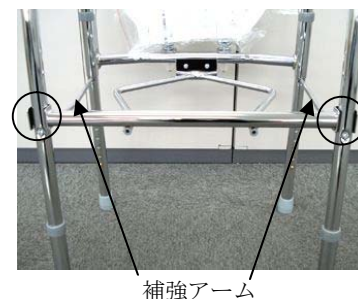


- 4) 座面受けフレームにバケツを取り付けます。
5) 脱落防止テープとフィルムカバーを取り外し、座面をおろします。



⚠ 注意

- 必ずビス等による固定にゆるみやガタつきがないか確認してください。
固定にゆるみやガタつきがある場合は、ビス等を増し締めしてください。
増し締め後もゆるみやガタつきがある場合は絶対に使用しないでください。
※ただし、座面受けフレームと本体をつなぐU型金具を留める2本のビスには、
意図的にあそびを設けていますので増し締めしないでください。U型金具が変形するおそれがあります。
- 高さ調節の際は、脚部のプッシュボタン4箇所を脚先が同じ高さになるように固定してください。固定が不完全な場合は本品が傾き、転倒するおそれがあります。
- 本品には、プッシュボタンによる固定が4箇所ありますので、プッシュボタンがすべて固定穴から大きく飛び出ていることを確認してください。
- プッシュボタンを深く押し込みすぎると脚パイプ（下部）の中に入り込んでしまう場合があります。その際は、いったん脚パイプ（下部）を引き抜き、プッシュボタンの位置を確認しながら再度取り付けてください。

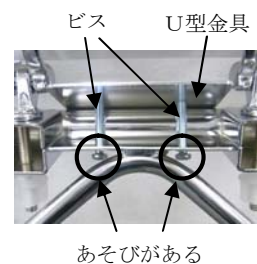

プッシュボタンが大きく
飛び出た状態

4. 保管方法

- 本品は水で清拭してください。洗剤等は使用しないでください。
- 腐食の原因となりますので、水を切って乾燥させてください。
- 湿気の少ない場所で保管してください。

※保管する前に各部を点検し、異常のないことを確認してください。もしも、異常を認めた場合はお買い上げの販売店にご相談ください。

5. 連絡先

販売元：村中医療器株式会社

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目8番2号

TEL 0725-53-5546

<http://www.muranaka.co.jp/>

注文コード	品番	商品名
502-002-10	8700AC	折りたたみ式簡易便器 5段階調節付(25mm きざみ)